


**PHILIPS**

*Efficia*

CMS200 Zentrales  
Überwachungssystem

Broschüre

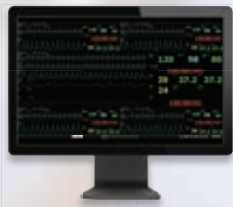

# Kostengünstige zentrale Überwachung

Sie sind bestrebt, einer großen Zahl von Patienten bei einem begrenzten Budget eine hochwertige Versorgung zukommen zu lassen. Mit einer kostengünstigen Zentralisierung der Patientenüberwachung können Sie entscheidend zu einer effizienten Arbeitsweise Ihres Personals beitragen. Das zentrale Überwachungssystem Philips Efficia CMS200 lässt sich mit Efficia CM oder SureSigns VM Patientenmonitoren<sup>1</sup> vernetzen. Auf diese Weise ermöglichen Sie nicht nur eine zentrale Überwachung und Alarmierung, sondern verbessern zudem den Zugriff auf Patientenverlaufsdaten. Die Kernfunktionalität der Überwachung von Efficia CMS200 ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig eine hervorragende Versorgung zu leisten und Budgetvorgaben einzuhalten. Wenn es auf Kosten und Qualität ankommt, spricht alles für Philips Efficia.

## Wesentliche Vorteile

- Anwenderfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche
- Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis, niedrige Gesamtbetriebskosten
- Zentrale Überwachung, sekundäre Alarmierung, bidirektionale Kommunikation ausgewählter Einstellungen sowie Datenanzeige, einschließlich Daten im Vollausschrieb, für einen effizienten Arbeitsablauf
- HL7-Ausgang als Schnittstelle zu ePA- oder KIS-Systemen

# Flexibel und anwenderfreundlich

Das zentrale Überwachungssystem Philips Efficia CMS200 zeigt Kurven, Parameter und Alarme vernetzter Patientenmonitore für bis zu 32 Patienten an. Für einen einfachen Zugriff auf die zahlreichen verfügbaren Daten können Sie die Benutzeroberfläche und die einzelnen Bereiche konfigurieren, je nachdem, ob Sie die Daten aus der Nähe begutachten oder aus der Ferne ablesen möchten.

Physiologische Daten können in Echtzeit sowie für die letzten zehn Tage angezeigt werden – einschließlich sämtlicher Kurven im Vollausschrieb. So haben Sie die Möglichkeit, den sich verändernden Gesundheitszustand eines Patienten zu verfolgen.



## Einfache Einrichtung und Installation

Efficia CMS200 verfügt über alle erforderlichen Komponenten (einschließlich Tastatur, Maus, Lautsprecher und Netzwerkschalter), damit sie sofort an Ihr Netzwerk zur Patientenüberwachung angeschlossen und eingesetzt werden kann. Dank intuitiver Bedienung und der integrierten Hilfefunktion ist der Schulungsaufwand äußerst gering.

## Erweitertes Alarm-Management

Efficia CMS200 kann zur sekundären Alarmauslösung verwendet werden und erfasst physiologische und technische Alarme im gesamten Netzwerk, gibt akustische und visuelle Benachrichtigungen aus und bietet die Möglichkeit, diesen von der Zentrale aus nachzugehen. Außerdem kann Efficia CMS200 Überwachungsdaten von den vernetzten Monitoren an Ihre elektronische Patientenakte weiterleiten.

## Bedienung des Monitors per Fernzugriff

Mit Efficia CMS200 können Sie bestimmte Monitorfunktionen von der Zentrale aus ausführen. Sie können Patientendaten einsehen, NBP-Messungen starten oder stoppen und Alarme von der Zentrale aus stummschalten. Dadurch können Sie sich auf eine effiziente Versorgung Ihrer Patienten konzentrieren, ohne sich dabei direkt am Patientenbett befinden zu müssen.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

<sup>1</sup> Das zentrale Überwachungssystem Efficia CMS200 ist mit SureSigns VM Patientenmonitoren mit der Software-Rev. A.03.93 und höher kompatibel.